

SONY



带框架 3D 眼镜

CFV-E30SK 医用 3D 眼镜套件

CFV-E20SK 医用 2D 眼镜套件

CFV-E30D 医用 3D 眼镜镜片

CFV-E20D 医用 2D 眼镜镜片

CFV-B100 医用眼镜框架

CFV-E30SK、CFV-E20SK、CFV-E30D、CFV-E20D 和 CFV-B100 医用眼镜系列主要用于观看索尼医用 3D 监视器上的影像。这几款眼镜的重量很轻，医务人员佩戴之后，可以有效提高 3D 手术的效率，并为手术、医务和临床人员提供良好的眼部保护*，防止血液喷溅、沾染体液，并使操作人员拥有清晰的画面可见度。

* 这几款产品不可用于在冲击、有害射线和其他危险环境下的眼部保护。




索尼的医用眼镜产品包括

型号	配置	应用
CFV-E30SK 医用 3D 眼镜套件 	眼镜框架 (1) 一次性医用 3D 眼镜镜片 (3)	供手术和医务人员使用的基本套件， 可观看 3D 监视器上的 3D 影像
CFV-E20SK 医用 2D 眼镜套件 	眼镜框架 (1) 一次性医用 2D 眼镜镜片 (3)	供手术室内进行手术支持的临床工作 人员使用的基本套件，可观看 2D 影像
CFV-E30D 医用 3D 眼镜镜片  (15)	一次性医用 3D 眼镜镜片 (15)	选配的医用 3D 眼镜镜片
CFV-E20D 医用 2D 眼镜镜片  (15)	一次性医用 2D 眼镜镜片 (15)	选配的医用 2D 眼镜镜片
CFV-B100 医用眼镜框架 	医用眼镜框架 (1)	选配的医用眼镜框架

CFV-E30SK 医用 3D 眼镜套件


CFV-E30SK 是一款医用 3D 眼镜套件，包括一个医用眼镜框架（CFV-B100）和三个一次性医用 3D 眼镜镜片。当医护人员在手术中，使用索尼医用 3D 监视器观看 3D 影像的时候，眼镜能够为他们的眼部提供有效保护。

每个 3D 环形偏振眼镜镜片都被装在框架上，该框架轻盈而舒适，可以长时间佩戴。佩戴眼镜后，可在临床手术期间保护专业医务人员，防止术中遇到的血液飞溅、沾染体液等情况。

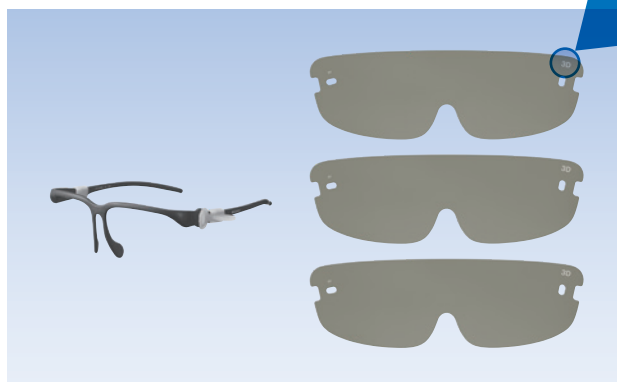

CFV-E20SK 医用 2D 眼镜套件

CFV-E20SK 是一款医用 2D 眼镜套件，包括一个医用眼镜框架（CFV-B100）和三个一次性医用 2D 眼镜镜片。它们是专门为支持手术人员的临床工作人员设计的。这些人员一般在 2D 环境下工作，如果他们经常使用 3D 眼镜，会容易患上所谓的“3D 病”。为了避免产生不舒适的感觉，同时使手术高效运行，他们需要佩戴装有 2D 滤镜的 2D 眼镜。这个滤镜能够让他们在 2D 模式下观看同一台 3D 监视器的画面。

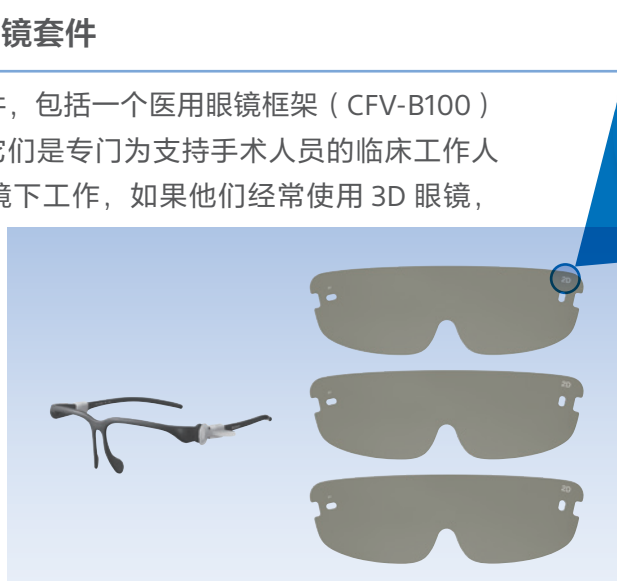

CFV-B100/E30D/E20D

为了使医务人员能够长期使用 CFV-E30SK 和 CFV-E20SK 套件，索尼公司专门推出了以下产品：

- CFV-B100，选购的轻便型眼镜框架，用于 CFV-E30SK/E20SK
- CFV-E30D，包括 15 个额外的一次性 3D 眼镜镜片，用于 CFV-E30SK
- CFV-E20D，包括 15 个额外的一次性 2D 眼镜镜片，用于 CFV-E20SK



带框架 3D 眼镜

技术规格

	CFV-E30SK 医用 3D 眼镜套件	CFV-E20SK 医用 2D 眼镜套件	CFV-E30D 医用 3D 眼镜镜片	CFV-E20D 医用 2D 眼镜镜片	CFV-B100 医用眼镜框架
操作温度	0℃ 至 40℃	0℃ 至 40℃	0℃ 至 40℃	0℃ 至 40℃	0℃ 至 40℃
操作湿度	30% 至 85%	30% 至 85%	30% 至 85%	30% 至 85%	30% 至 85%
存放/运输温度	-20℃ 至 +60℃	-20℃ 至 +60℃	-20℃ 至 +60℃	-20℃ 至 +60℃	-20℃ 至 +60℃
存放/运输湿度	20% 至 90%	20% 至 90%	20% 至 90%	20% 至 90%	20% 至 90%
存放/运输压力	700 hPa 至 1060 hPa	700 hPa 至 1060 hPa	700 hPa 至 1060 hPa	700 hPa 至 1060 hPa	700 hPa 至 1060 hPa
尺寸 *	约 160 x 45 mm (眼镜框架) (1) 约 235 x 77 mm (3D 眼镜镜片) (3)	约 160 x 45 mm (眼镜框架) (1) 约 235 x 77 mm (2D 眼镜镜片) (3)	约 235 x 77 mm (3D 眼镜镜片) (15)	约 235 x 77 mm (2D 眼镜镜片) (15)	约 160 x 45 mm
重量	约 16 g (眼镜框架) (1) 约 7 g (3D 眼镜镜片) (3)	约 16 g (眼镜框架) (1) 约 7 g (2D 眼镜镜片) (3)	约 7 g (3D 眼镜镜片) (15)	约 7 g (2D 眼镜镜片) (15)	约 16 g
随机附件	操作说明书 (1) 安装方式 (1)	操作说明书 (1) 安装方式 (1)	操作说明书 (1) 安装方式 (1)	操作说明书 (1) 安装方式 (1)	操作说明书 (1) 安装方式 (1)
安全规章	欧洲： DIN EN 166:2002-04 (非完全符合)**				

* 尺寸数值为近似值。
** 这几款产品遵循依据关于个人保护设备的 89/686/EEC 指令的附录 II 的要求。

相关产品



LMD-2451TC
高清医用 3D 监视器



BKM-30GM
环形偏振 3D 眼镜



BKM-31GM
环形偏振 3D 眼镜 (夹片式)

注意：BKM-30GM/31GM 的偏振性能与 CFV-E30SK/E20SK 相同。



索尼公司版权所有。
未经版权人书面许可，
不得复制、发行、删改、摘编、转载或通过信息网络传播。
所有非公制的重量和尺寸均为近似值。
索尼保留更改产品设计与规格的权利。
地址和电话以发行日为准。

索尼专业产品服务热线：400-810-2208
<https://www.sonystyle.com.cn/professional/>

索尼（中国）有限公司			
北京	上海	广州	成都
地址：北京市朝阳区新源南路1号	地址：上海市浦东新区居里路361号	地址：广州市天河区华夏路26号	地址：成都市锦江区东大街东大街段258号
平安国际金融中心商业楼3层301室	邮编：201203	1101、1107、1108	西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：100027	电话：(021) 6121-6219	邮编：510623	邮编：610016
电话：(010) 8458-6668		电话：(020) 3810-2166	电话：(028) 6210-2161